



Procedimiento de limpieza


1. Asegúrese que no existe producto en el interior del contenedor del producto.
2. Remueva el filtro multimangas. Primero gire el interruptor “cambio de filtro” hacia la izquierda y luego bájelo girando la manivela del winche

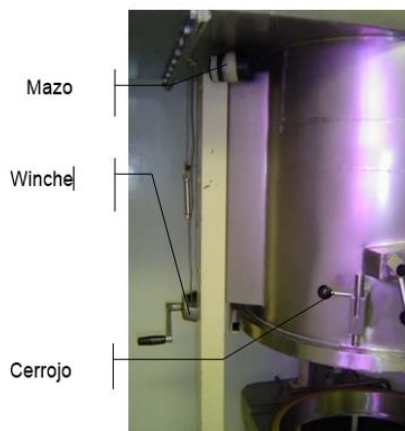

3. Desconecte el filtro multimangas de la guaya removiendo el seguro y los pines de aterramiento

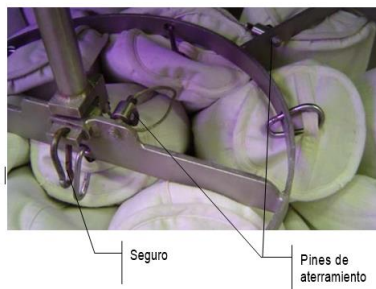

4. Abra el desagüe que se encuentra en la parte inferior de la torre, desenroscando el tapón

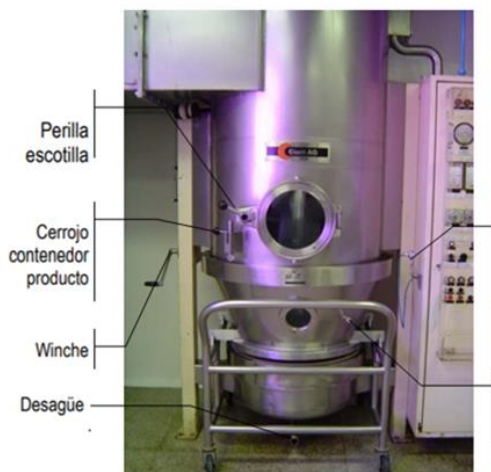

5. Chequee que el equipo no requiera de trazas, según SOP N° P-PFQ-153. En caso afirmativo, realice la inactivación ya sea para esteroides (SOP N° P-PFQ-151) o para antimicrobianos (SOP N° P-PFQ-152).
6. Colóquese las botas y limpie el equipo interna y externamente utilizando una manguera con agua industrial. Luego con un cepillo aplique el desinfectante de turno según SOP N° PPRV-039.
7. Enjuague el contenedor del producto cuidadosamente de modo de que la malla no quede obstruida con ningún producto.
8. Enjuague con agua hasta que no quede residuo visible del desinfectante, verifique SOP N° P-PFQ-094.
9. Enjuague la pistola dosificadora con agua y jabón. Desármela desenroscando la punta y enjuague las agujas

Anexo #11: Pistola dosificadora



10. Coloque el filtro multimangas en su carro y llévelo al cuarto de limpieza, cuélguelo en la señorita y elévelo a una altura superior a la cabeza. Utilizando el compresor con agua caliente a presión, límpielo hasta que no quede residuo. Luego espere a que escurra y seque.
11. Coloque la etiqueta de “Equipo Limpio”, según indica SOP N° P-PFQ-026.